



Energy flow

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Mobile Port

Kedves Lenyo Mobile Port Tulajdonos!

Köszönjük, hogy a **Hippocampus-BRT Kft.** által fejlesztett és gyártott készüléket választotta.

A **Hippocampus-BRT Kft.** több évtizedes kutatási háttere és innovációs stratégiája biztosítja, hogy Ön a legmodernebb, mindemellett az emberi test működésének törvényeit a legmesszebbmenőkig figyelembe vevő eszközt használhasson.

A **Lenyo Mobile Port** egy pulzáló mágneses teret kibocsátó, általános használatra kifejlesztett wellness mobil készülék. A készülékre tetszőleges 4 programcsomag tölthető le számítógépről (vagy más Lenyo készülékről, opcionális).

Használata egyszerű és kényelmes, mégis igen hasznos, ha végigolvassa ezt a tájékoztatót. A használati utasítás olvasása alatt tartsa a **Lenyo Mobile Port** készüléket maga előtt, hogy az ismereteket azonnal átültethesse a gyakorlatba.

Amennyiben a használat során további kérdései merülnek fel, a **Hippocampus-BRT Kft.** munkatársai készséggel nyújtanak további információt. **A készülék CE jelzéssel ellátott wellness eszköz, egészségre gyakorolt kedvező hatása nem bizonyított.**

A gyártó a fejlesztés jogát fenntartja magának, ennek következtében előfordulhat, hogy a konstrukció a leírástól néhol kis mértékben eltér. Az eltérés mindenkor a magasabb műszaki színvonal megvalósítását célozza.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	5
A készülék és tartozékai	7
A készülék kezelési utasítása	8
A készülék kezelőgombjai	8
A készülék használata	9
Bekapcsolás	10
Programválasztás	10
A program elindítása	11
Hangszabályozás	11
Programcsomagok letöltése számítógépről	12
Hibaelhárítás	13
A készülék karbantartása, tisztítása	13
Lenyo Mobile Port műszaki adatok	14
Garancia	15

Biztonsági előírások

A használatba vételt megelőzően tanulmányozza a kezelési utasítást és mindenben az abban foglaltak szerint járjon el! A készülékeket és tartozékaikat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja!

Soha se használja a készüléket, ha annak, vagy tartozékának kábele/csatlakozója/burkolata sérült vagy rendellenesen működik! Meghibásodás esetén forduljon garanciális szervizünkhöz!

A készülékhez kizárólag a gyártó által szállított tartozékokat használja (jelki-bocsátó, adapter stb.). A garancia is csak ebben az esetben érvényes.

Ne használja a készüléket nedves környezetben, fürdőszobában, uszodában!

Ne helyezzen vizet vagy bármilyen más folyadékot tartalmazó edényt a készülékre!

Ha a készüléket nagyon hideg környezetben szállította, tárolta, pl. hosszabb időn keresztül $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatt volt, és utána egy meleg szobában kívánja üzemeltetni, a páralecsapódás okozta belső nedvesség megzavarhatja a működést, ezért csak azután kapcsolja be azt, ha már felmelegedett szobahőmérsékletre!

A készülék egyik elemét se tárolja közvetlen napsugárzásnak, sugárzó hőnek vagy magas páratartalomnak kitett helyen!

Óvja a készüléket és tartozékait az erős rázkódástól, ütődéstől, fizikai behatástól. A felhasználó és a kezelő személy ruházata lehetőleg legyen sztatikus töltődéstől mentes.

Ügyeljen rá, hogy gyermekek, illetve korlátozott cselekvőképességű személyek a terméket csak felügyelet mellett használják!

A készülék speciális elektronikai elemeket tartalmaz, felhasználó által nem javítható! A pontos és hatékony jelkibocsátás érdekében a garanciális és garancián túli javítását is csak a gyártó végezheti!

A már nem javítható (selejtezésre szánt) készüléket környezetvédelmi szempontok miatt soha ne dobja a szemétkosárba, kizárólag elektronikai hulladékot begyűjtő helyen vagy a gyártó telephelyén adja le.

A készülék és tartozékai

A készülékhez a programcsomagokat is tartalmazó kezelőszoftvert a felhasználó pendrive-on kapja meg. Beépített jelkibocsátóval működik, külső antenna csatlakoztatására nincs lehetőség.

A Lenyo Mobile Port készlet összetétele:

- Lenyo Mobile Port készülék
- Szoftver és információs adathordozó
- Letöltő kábel PC-hez (csak komplett - csomag rendeléséhez)
- Kézikönyv



A készülék kezelési utasítása

A készülék kezelőgombjai

A **Lenyo Mobile Port** kezelőfelületének kialakításakor elsődleges szempontként az egyszerűséget és átláthatóságot vettük figyelembe. A kezelőgombok a jelgenerátor előlapján helyezkednek el. A baloldali gombbal lehetséges az indítás és megállítás, a jobboldalival pedig a programhely (1, 2, 3, 4) kiválasztása és a hangbeállítás. A készülék beépített jelkibocsátóval működik, külső jelkibocsátó csatlakoztatására nincs lehetőség.

A **Lenyo Mobile Port** készülékre 4 programcsomagot letöltve azt magával viheti és használhatja, akár mozgás közben is.



A készülék használata

Gondosan válassza meg a készülék helyét! Ne tegye hőforrások, pl. radiátor közvetlen közelébe, sem légkondicionáló készülék légáramlatába.

A készülék helyének kiválasztásánál kerülje a mágneses mezőt generáló készülékek szomszédságát. A használat idején a különböző zavaró magas sugárzású elektromos készülékek (pl.: televízió, monitorok) működése csökkentheti a hatékonyságot, ezért javasolt azok kikapcsolása. Fontos még a kvarc karóra levétele, telefon kikapcsolása és/vagy távol helyezése. A számítógép is zavaró EM teret generál, ezért a készülék használata közben lehetőleg kapcsoljuk azt ki. Számítógéppel végzett munka közben viszont bizonyos programcsomagok (pl. Elektroszmog) futtatása kifejezetten előnyös lehet.

A **Lenyo Mobile Port** készülék az elemek behelyezése után üzemkész.

A készülék energiaellátását 2 db

hagyományos AA méretű 1,5

V-os ceruzaelem vagy en-

nek megfelelő akkumulátor

biztosítja. A külön fedéllel

nyitható elemtartó a készülék

hátlapján található. A készülék

hátdoldalán az elemtartó fedelét

a hossz tengely irányában húzva

kinyitjuk, így az elemtartó hozzáfér-

hetővé válik. Az elemek a jelölt pola-

ritásnak megfelelően helyezendők be oly

módon, hogy a (későbbi kivételt elősegítő) szalag az elemek alá kerüljön.

Ezután a fedelet illessze a helyére. Csak azonos típusú és friss gyártású,

minimum féltartós (alkáli vagy extra long life) elemeket alkalmazzon.



Fontos! Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánjuk használni, akkor az elemeket érdemes eltávolítani az elemtartóból.

A készülék működés közben ellenőrzi a tápfeszültség megfelelő értékét. Amennyiben a tápfeszültség nem éri el a szükséges értéket, a készülék oldallapján ezt egy piros fényel világító LED (low battery) jelzi. Üzem közben a piros LED (low battery) felvillanása az elemek lemerülését jelzi. Minél hosszabb ideig tart egy-egy felvillanás, annál inkább kimerülőben vannak az elemek. A LED a feszültség csökkenésének arányában egyre többször és egyre hosszabban villan fel, végül a telepfeszültség egy bizonyos határértékének elérésekor a készülék bűgő hang kíséretében automatikusan kikapcsol. A készülék műanyag dobozba épített elektronikus eszköz, vezérlését beépített mikroprocesszor végzi, és egyszerre a felhasználó által kiválasztott négy programcsomagot képes tárolni. A programcsomagok mindegyike több egymásra épülő alprogramból áll, ezért futásukat menet közben ne szakítsa meg. A programcsomagot alkotó teljes alprogramsor lefutása után a készülék automatikusan leáll.

Bekapcsolás

A be/ki (ON-OFF) kapcsológomb megnyomásakor a készülék rövid hangot ad, és az 1,2,3,4 világító diódák (LED) felváltva villogni kezdenek.

Programválasztás

A készülék bekapcsolása után nyomjuk meg a jobboldali (SELECT) gombot és válasszuk ki a futtatni kívánt programot. A kiválasztott programnak megfelelő LED fényjelzés fog világítani.



A program elindítása

A baloldali gomb újbóli megnyomásával (START) indítsuk el a programot.

Hangszabályozás

A hangeffektusok nem csupán a programot alkotó alprogramok nyomon követését teszik lehetővé, a hatékonyságot is növelik. Amennyiben a hangeffektusokat mégsem kívánjuk használni, a jobboldali SOUND gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk ezt a funkciót. A gomb egyszeri megnyomásával ki-, újbóli megnyomásával visszakapcsolhatjuk a hangot.

Működés közben a készüléket úgy helyezzük el (pl. ruhazsebben), hogy annak hátoldala a lehető legközelebb legyen testünkhöz, illetve a közérzetromlást okozó testrészhez.

Fontos tudnia, hogy a készülék használata az orvosi ellátást nem pótolja, ugyanakkor a készülék használata oly módon egészítheti ki az orvosi kezelést, hogy a fizikai közérzetre kedvező hatást gyakorolhat kellemetlen mellékhatások nélkül, így teljes biztonsággal használható.

Ha túlzott használat esetén átmeneti érzeteket tapasztal (fáradtság, nyugtalanság...), függesse fel a készülék használatát és legközelebb rövidebb ideig használja. A készülék alkalmazásakor lehetőleg ne igyon a felhasználó kávét és más erős stimuláns italt, pl.: energiatalt.

A készülék használata során a következő irányelveket tartsa szem előtt:

- Egy alkalommal maximum 4 programcsomagot használjon közvetlenül egymás után, majd javasolt körülbelül 30 percnyi szünetet tartani, hogy a szervezet fel tudja dolgozni az őt ért ingereket. Egy nap maximum 12 programcsomag futtatható.
- Egy nap maximum 9 azonos programcsomag használható.
- Fontos, hogy a jelkibocsátó mindig a tüneteket mutató felülethez a lehető legközelebb helyezkedjen el.
- Támogató programcsomagok használata is ajánlott az elsődleges programcsomag mellett.

- Javasoljuk, hogy minden alkalmat a Kiegyenlítő programmal kezdjen és zárjon.
- Gyermekeknél maximum összesen 6 ciklust futtasson naponta, egy programcsomagból maximum egyet. Akut probléma esetén gyermekeknél naponta 2 ciklust futtasson programcsomagonként, maximum 4 alkalommal.

Programcsomagok letöltése számítógépről

A vezérlőszoftver használatát a Lenyo Mobile Port vezérlőszoftver leírásából ismerheti meg. Miután ezt tanulmányozta, megismerte és összeállította a kívánalmainak megfelelő programcsomagokat (protokollokat), csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB portjához a mellékelt letöltő kábellel. Végül kapcsolja be a Lenyo Mobile Port készüléket. Ezután a kiolvasás és letöltés működni fog. Miután a programcsomagokat letöltötte, kapcsolja ki, majd válassza le a készüléket a számítógépről és csak ezután kapcsolja be újra. Amennyiben a vezérlőszoftvert leállítja, a Lenyo Mobile Port készülék – az elemek kímélése érdekében – kb. 2 perc után automatikusan kikapcsol.



Hibaelhárítás

Hibajelenség: Egyáltalán nincs működés

Lehetséges ok: Nincs tápfeszültség

Javítás: Nincs a készülékben elem, vagy kimerült. Cseréljen elemet, ha továbbra sem működik, szakszerviz.

Hibajelenség: A nyomógomb nem működik

Lehetséges ok: Kontakthiba

Javítás: Szakszerviz.

A készülék karbantartása, tisztítása

A készülék a sérülésmentesség használat előtti szemrevételezésén kívül nem igényel különleges karbantartást. A tisztítást szükség esetén nedves vagy száraz, antisztatikus törlőkendővel végezze. Nedves tisztításhoz nem bolyhosodó, puha textíliát használjon! A törlőkendő nedvesítésére kizárólag tiszta vizet használjon.

A Lenyo Mobile Port műszaki adatai

Modell:	Lenyo
Típus:	Mobile Port
Kijelző:	4 sárga LED az előlapon
Sugárzó felület:	Belső jelkibocsátó panel
Működési elv:	Pulzáló mágneses tér gerjesztése előre meghatározott program szerint.
Frekvenciatartomány:	1 Hz – 200 kHz (-3 dB)
Kimenő jel:	pulzáló mágneses tér, az időfüggvény alakja: négyzög. A sugárzó felület közelében (készülék hátoldalán) mérhető mágneses indukció értéke legfeljebb 10 μ T (az alapharmonikus amplitúdója csúcstól csúcsig; a teljes frekvenciatartományban. Kitöltési tényező 1:5).
Tápellátás:	2 db (AA) ceruzaelem, 1.5 V.
Működési hőmérséklet:	+5 °C - +40 °C
Relatív páratartalom:	max. 80 %
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C – +50 °C
Méret:	10 cm x 6.1 cm x 2.1 cm
Méret:	100 g
Gyártó:	Hippocampus–BRT Ltd.
Származási hely:	EU

Garancia

A Hippocampus-BRT Kft. a vonatkozó előírások szerint a készülékre 2 év, a tartozékokra 12 hónap garanciát vállal. A garancia a készülék (számla szerinti) üzembe helyezésének időpontjától számít. Garanciális problémákkal kérjük, forduljon bizalommal a terméket értékesítő partnerünkhöz. Amennyiben bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni kereskedőjével, kérjük, jelezze garanciaigényét az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

Postacím:

Hippocampus-BRT Kft.
1082 Budapest, Baross utca 3.
Tel.: 06-1-411-0469
honlap: www.hippocampus-brt.com
E-mail: info@hippocampus-brt.com

DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER: HIPPOCAMPUS-BRT LTD.
H-1097 Budapest, Illatos út 9.
Hungary

PRODUCT NAME: LENYO MOBILE PORT

We herewith declare that the above mentioned products comply with the requirements of 2006/95/EC – Low Voltage Directive (LVD); 2004/108/EC – Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and 2011/65/EC - Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS).


STANDARDS APPLIED: EN ISO 9001:2009
EN 55011:2010
EN 60601-1-2:2008
EN61000-3-2:2006
EN 60335-2-23:2003
EN 60335-2-23:2003/A11:2011
EN 60335-2-23:2003/A1:2008



PLACE AND DATE OF ISSUE: Budapest, 25th of September, 2014.


Gábor Lednyiecky
Managing Director
HIPPOCAMPUS-BRT KFT.
1097 Budapest, Illatos út 9.

Hippocampus-Brt Kft.
1097 Budapest, Illatos út 9.
Tel: (+36)-1-411-0469, Fax: (+36)-1-328-0420
info@hippocampus-brt.com www.hippocampus-brt.com

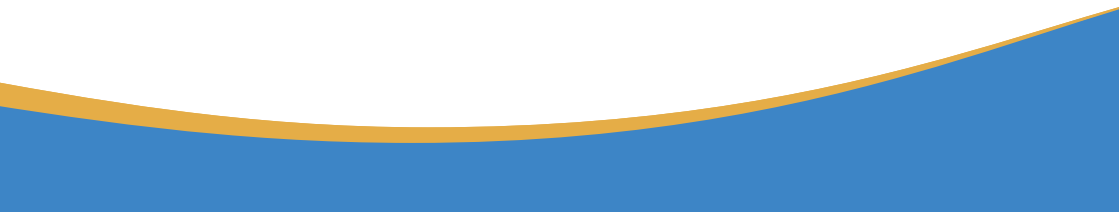



2015 Hippocampus-BRT Kft., Budapest.
Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bármilyen formában történő sokszorosítása, másolása, fordítása – beleértve az elektronikus másolást, tárolást vagy továbbítást – kizárólag a Hippocampus-BRT Kft. írásos engedélyével lehetséges.